



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

80700, Львівська обл., м. Золочів, вул. Коновальця Є., 48, тел./факс (0265) 4-21-36, e-mail: zolcrl@i.ua
КОД ЄДРПОУ 01996272

05.02.24 № 164-02/07

Адвокату
Петру БІЛАНУ
79013 Львівська область
м. Львів, площа Св. Юри 6/1
е-пошта petro.bilan.bdp@gmail.com

Адміністрація КНП «Золочівська ЦРЛ» на Ваш адвокатський запит від 17.01.2024р № 4 відносно проведеного медичного огляду водія КУСОВИЧА Олега Володимировича, 28.01.2001 року народження з метою виявлення ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, надає наступну інформацію:

1. Підтверджуємо факт проведення огляду з метою виявлення ознак алкогольного сп'яніння в гр Кусовича О.В. лікарем приймального відділення – лікарем - терапевтом лікувального приймального відділення КНП «Золочівська ЦРЛ», який пройшов тематичне навчання для лікарів у лікаря – нарколога лікувально-діагностичного відділення КНП «Золочівська ЦРЛ» 15 серпня 2023 року.

2. Відповідно до Акту медичного огляду з метою виявлення ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції №2 від 02.01.2024 медичний огляд гр. Кусовича О.В. на стан алкогольного сп'яніння проводився 02.01.2024 об 00 год 40 хв

3. Для проведення огляду з метою виявлення в Кусовича О.В. ознак алкогольного сп'яніння лікар лікувального приймального відділення КНП «Золочівська ЦРЛ» проводив обстеження газоаналізатором АлкоФор 505, №22068, виробник - фірма Skyfine Inc. Limited, КНР.

4. Так, газоаналізатор АлкоФор 505 вимірює цифровий показник проміле алкоголю в крові.

5. В результаті проведеного огляду (02.01.2024) з метою виявлення в Кусовича О.В. ознак алкогольного сп'яніння встановлено – 1,049 ‰

6. Лабораторні дослідження з метою визначення показника проміле алкоголю в крові щодо гр. Кусовича О.В. в нашій установі не проводились.

Додаються копії:

1. Інструкції з експлуатації Алкоформ 505

2. Акту медичного огляду з метою виявлення ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції №2 від 02.01.2024
3. Висновку №2 щодо результатів медичного огляду з метою виявлення ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції від 02.01.2024
4. Сертифікату (налаштування) калібрування алкотестера від 19.12.2023 Модель : Алкоформ 505, серійний номер 22068;
5. Свідчення про перевірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 12-01/6936 чинний до 19.12.2024

В.о. директора

КНП «Золочівська ЦРЛ»



Марта МЕНЬКО

Додаток 3
до Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (пункт 6 розділу III)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КНП «Золочівська ЦРЛ»

(найменування закладу)

АКТ

медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції,

№ 2

Дата заповнення 02 01 2024 року 00 год 40 хв.

1. Прізвище, ім'я, по батькові особи Кусович олег Володимирович

2. Дата народження 28.01.2001 | (число, місяць)

3. Назва, серія і номер документа, що посвідчує особу (за наявності) _____

Особа встановлена поліцією.

4. Ким л-нт поліції Зозуля

(посада, найменування підрозділу Національної поліції України, спеціальне звання, П.І.Б., підпис) та коли (точний час) направлена на огляд 02.01.2024 року 00 год 40 хв.
(число, місяць)

5. Назва, серія і номер документа, що посвідчує особу, яка доставила обстежуваного на огляд №

6. Дата і точний час огляду 02.01.2024 року 00 год. 40 хв.

(число, місяць)

7. Ким оглянута особа черговий лікар Капітанець М.М.

(прізвище, ім'я, по батькові лікаря /фельдшера)

8. Назва закладу охорони здоров'я, де проводився огляд КНП «Золочівська ЦРЛ»

9. Зовнішній вигляд обстежуваної особи: стан одягу, шкіри, наявність пошкоджень (поранення, забиті місця, точна локалізація, характер пошкодження, тощо) Одяг чистий без ушкоджень

10. Поведінка обстежуваної особи: неадекватна, напружена, замкнута, роздратована, збуджена, агресивна; _____ небалакучий, метушлива; настрої стійкий, млявий, загальмований (підкреслити), _____ скарги на свій стан (на що саме)

скарг не має

11. Стан свідомості, орієнтування на місці, у часі та власній особистості _____

в свідомості, в часі, просторі та власній особі орієнтується

12. Мовна здатність: порушена, зв'язність висловлювань, порушення артикуляції, змазаність мови та інше (підкреслити) _____

13. Вегетативно-судинні реакції (стан шкірних покривів, слизових оболонок очей, язика, спитніння, слинотеча) шкіра та слизові звичайного кольору

Дихання: незмінене, прискорене, уповільнене (підкреслити), кількість подихів на хвилину 19

Пульс 76 Артеріальний тиск 130/80

Зіниці: не розширені, звужені, розширені; реакція на світло: жива, млява (підкреслити)

Ністагм при погляді вбік

14. Рухова сфера порушена

Міміка: звичайна, млява, _____

Хода не порушена- похитування при ходьбі (розкидування ніг під час ходи), хода зі швидкими поворотами (без хитань, хитання при поворотах) _____ поза Ромберга (описати) _____

нестійкий

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

02.02.24 юрислюсць

м.п. Т. Шаваровська

Точні рухи (підняти монету з підлоги, пальце-носова проба) промахування

Тремтіння повік, язика, пальців рук (підкреслити)

15. Чи є ознаки нервово-психічних захворювань, органічного ураження центральної нервової системи, фізичного виснаження. Перенесені травми (зі слів обстежуваного) зі слів обстежуваного – не вказує

16. Відомості про останнє вживання алкоголю або наркотичних речовин чи лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції: суб'єктивні та об'єктивні (згідно з документами, іншими джерелами)

не вказує

17. Запах алкоголю з рота слабо виражений

18. Використання технічних засобів для визначення наявності або вимірювання вмісту етилового спирту у видихуваному повітрі (відповідно до встановленого рівня).

Час обстеження, назва спеціального технічного засобу, за наявності – його номер, дата останньої повірки, результат обстеження _____

Обстеження через 20 хвилин. Час обстеження, назва спеціального технічного засобу, за наявності – його номер, дата останньої повірки, результат обстеження _____

19. Інші прояви та симптоми _____

20. Висновок та діагноз за результатами огляду Алкогольне сп'яніння без т/у, Алкофор 505%-1.049%

Лікар (фельдшер), який проводив огляд _____

Капітанець М.М

(підпис)

21. Лабораторна діагностика з метою уточнення наявних речовин впливу:

час проведення лабораторних тестів _____;

досліджуване біологічне середовище (, слина, кров, змиви поверхні губ, шкіри обличчя, рук) (необхідне підкреслити)

22. Дата і час відбору _____

23. Метод лабораторного тестування _____

24. Результат лабораторних тестів _____

25. Заключний діагноз (за результатами огляду та тестів) _____

Лікар-нарколог _____

(дата) (підпис) (П.І.Б.)

02.02.2024

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

присвоєно



Т. Шаверовська

Додаток 4

до Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (пункт 16 розділу III)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КНП «Золочівська ЦРЛ»

(найменування закладу)

ВИСНОВОК №2

щодо результатів медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції

1. Дата заповнення 2 січня 2024 року
(число, місяць)

На підставі даних, що містяться в акті медичного огляду особи, що керує транспортним засобом, з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, № 2, складеному о 00 год. 40 хв. 02.01.2024 року.

2. Прізвище, ім'я, по батькові особи: **Кусович Олег Володимирович**

3. Дата народження 28.01.2001
(число, місяць, рік)

4. Назва та номер документа, що посвідчує обстежувану особу (за наявності)

Особа встановлена поліцією

5. Ким : мол.л-нт поліції Зозуля

(посада, найменування підрозділу Національної поліції України, спеціальне звання, П.І.Б., підпис)
та коли (точний час) направлена на огляд 02 01 2024 року 00 год. 40 хв.
(число, місяць)

6. Назва, серія і номер документа, що посвідчує особу, яка доставила обстежуваного на огляд

7. Дата і точний час огляду 02.01 2024 року 00 год. 40 хв.
(число, місяць)

8. Ким оглянута особа черговий лікар Капітанець М.М.
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря /фельдшера)

9. Назва закладу охорони здоров'я, де проводився огляд **КНП «Золочівська ЦРЛ»**

10. Висновок огляду (повідомляється в присутності поліцейського) (зайве викреслити):

1) гр.: **Кусович О.В** (П.І.Б.)

перебуває у стані: **Перебуває в стані алкогольного сп'яніння без т/у, Алкофор 505%-1,049%о**

11. Підпис обстежуваної особи про ознайомлення з результатами огляду _____

12. Лікар (фельдшер), який проводив огляд Капітанець М.М
(підпис, П.І.Б.)

М.П.

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

02.02.2024 *юрислюс* *М.М. Шаваровська*



МІНЕКОНОМІКИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ
ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»
(ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143

Свідоцтво про уповноваження № П-9-2019 від 14 лютого 2019 р.

СВІДОЦТВО

про перевірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

№ 12-01/6936

Чинне до « 19 » 12 20 24

Назва та умовне позначення

Газоаналізатор АлкоФор 505

Зав. № 22068

Виробник фірма Skyfine Inc. Limited, KNP

За результатами перевірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки
(далі – ЗВТ) відповідає вимогам ДСТУ 8950:2019

(назва нормативно-правового акта,

Межі допустимої абсолютної похибки (в інтервалі діапазону вимірювання
що містить вимоги до метрологічних характеристик і значення метрологічних

від 0 до 0,5%) – $\pm 0,05\%$; відносно (в діапазоні вимірювання понад 0,5%) – $\pm 10\%$
характеристик (клас точності, похибки, діапазон вимірювання), особливості застосування ЗВТ)

Додаток: на - стор. у - прим.

Виконавець

П.В. Петришин
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Місце відбитка
піврічного тавра

« 19 » 12 20 23



МІНЕКОНОМІКИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ
ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»
(ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143

Свідоцтво про уповноваження № П-9-2019 від 14 лютого 2019 р.

СВІДОЦТВО

про перевірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

№ 12-01/6936

Чинне до « 19 » 12 20 24

Назва та умовне позначення

Газоаналізатор АлкоФор 505

Зав. № 22068

Виробник фірма Skyfine Inc. Limited, KNP

За результатами перевірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки
(далі – ЗВТ) відповідає вимогам ДСТУ 8950:2019

(назва нормативно-правового акта,

Межі допустимої абсолютної похибки (в інтервалі діапазону вимірювання
що містить вимоги до метрологічних характеристик і значення метрологічних

від 0 до 0,5%) – $\pm 0,05\%$; відносно (в діапазоні вимірювання понад 0,5%) – $\pm 10\%$
характеристик (клас точності, похибки, діапазон вимірювання), особливості застосування ЗВТ)

Додаток: на - стор. у - прим.

Виконавець

П.В. Петришин
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Місце відбитка
піврічного тавра

« 19 » 12 20 23

Значення: 1.00

Для нових приладів - не заповнюється

Значення: 1.00

Стандартний зразок розчину етилового спирту у воді ДСЗУ 022.184-2015

Масова концентрація етанолу: 1,00%

Нормативна база:

з вимірювачі вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видається, випробується для Технічного регламенту законодавчо регульованих ЗВГ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 94, яка набрала чинності 04.09.2016.

уб'єкти господарювання зобов'язані своєчасно, з дотриманням становлених міжповіровочних інтервалів, подавати законодавчо регульовані ЗВГ, що перебувають в експлуатації, на періодичну повірку. Міжповіровочні тервали законодавчо регульованих ЗВГ, що перебувають в експлуатації, за категоріями затверджено наказом Мінекономрозвитку від 13.10.2016 №1747, зареєстрованим в Мініюсті 01.11.2016 №1417/29547 (Далі — Наказ №1747).

ідно з Наказом №1747 для вимірювачів вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видається, міжповіровочний інтервал становить 1 рік.

Користі посилання:

хнічний регламент Про затвердження міжповіровочних законодавчо регульованих інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями



СЕРТИФІКАТ

НАЛАШТУВАННЯ (КАЛІБРУВАННЯ) АЛКОГОТЕСТЕРА

Дата налаштування (калібрування): 19.11.2023

Модель: АІК-001 505 серійний номер 112068

Замовник: КНП, Івано-Франківська обл. 441-34193910

Операції налаштування (калібрування):

- зовнішній огляд;
- випробування;
- визначення похибки алкотестера за допомогою генераторів спирто-повітряних сумішей;
- налаштування алкотестера;
- повне тестування працездатності приладу.

Умови налаштування (калібрування):

- температура навколишнього повітря (20 ± 5) °С;
- відносна вологість навколишнього повітря від 30 до 80 %;
- атмосферний тиск (101,3 ± 4,0) кПа.

Висновок: після налаштування (калібрування) характеристики приладу відповідають нормам, наведеним в експлуатаційній документації. Детальна інформація по налаштуванню зі зворотної сторінки цього сертифікату.

Згідно з інструкцією з експлуатації даного приладу, наступне технічне обслуговування алкотестера необхідно провести не пізніше:

19.11.2024
Число/Місяць/Рік


Технік з експлуатації та ремонту устаткування: Валерій ГЛОВАЦЬКИЙ

УКРАЇНА
044-221-22-61

Директор
ТОВ "Сорбополімер-Аналітик" Микола КОНОНОВ

Даний сертифікат має інформаційний характер, свідчить про проведення технічного обслуговування алкотестера і не є свідченням про повірку засобу вимірювальної техніки, відповідном про метрологічну атестацію, а також не є сертифікатом калібрування згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025.

АлкоФор 505

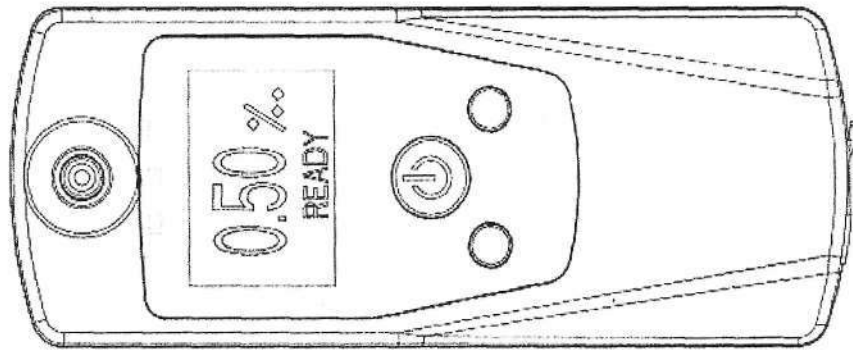

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1706-505-02-UA

1

ЗМІСТ

Призначення та галузь застосування	3
Рекомендації щодо експлуатації	3
Живлення	3
Загальний вигляд	4
Проведення тесту	5
Підключення до мобільного принтеру	7
Режим пасивного тесту	8
Комплект постачання	8
Налаштування приладу	9
Завантаження інформації	10
Технічні характеристики	11
Попередження та повідомлення про помилки	12
Свідчення про приймання	13
Облік калібрування та технічного обслуговування ..	13
Гарантійний талон	14
Сертифікат перевірки титру	15

Офіційна веб сторінка:
alkofor.ua

Постачальник:
ПКВФ "Сорбополімер"
Тел. +38 (044) 221-22-61

Призначення та галузь застосування


Вимірювач вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається, АлкоФор 505 призначений для вимірювання вмісту парів етилового спирту у повітрі, що видихає людина та застосовується для встановлення факту вживання алкоголю лодиною, у тому числі водіями транспортних засобів. Для виконання тесту використовуються змінні одноразові пластикові мундштуки. У режимі продування через мундштук аналізатор автоматично контролює тривалість видоху і витрату повітря відповідно до заводських налаштувань. Зразок проби повітря для аналізу забирається в кінці видоху з області легень найбільш насичених парами етанолу.

Рекомендації щодо експлуатації

Використовуйте прилад лише при температурі навколишнього середовища від -5°C до $+45^{\circ}\text{C}$. Слід приступати до тестування не раніше, ніж через 3 хв. після паління і 20 хв. після вживання спиртних напоїв. Перед тестуванням, людина, що перевіряється, повинна дихати повільно, необхідно уникати швидких вдохів і видохів.


Живлення

- Відкрутіть закріплювальний гвинт і зніміть кришку для елемента живлення на зовнішній стороні приладу.
- Вставте літій Іонну акумуляторну батарею (BL-5C) таким чином щоб контакти елемента живлення співпали з контактами приладу.

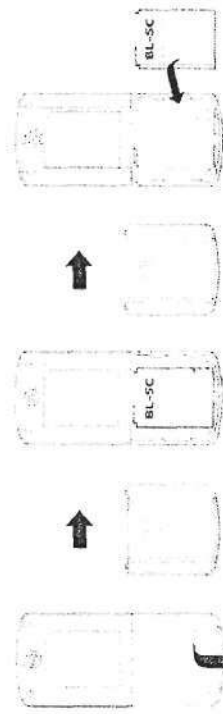

- У винятку, коли напруга замала, прилад відобразить на екрані символ «»». Прилад може працювати некоректно, тому необхідно зарядити батарею.
- Можливе використання приладу від USB кабеля.

Загальний вигляд

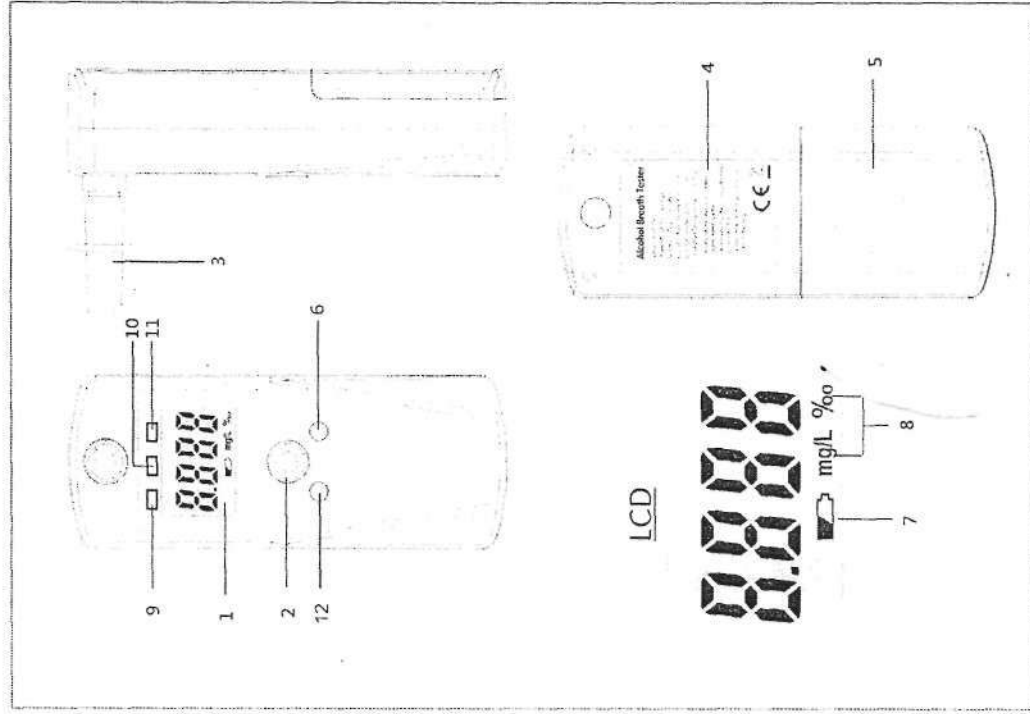

1. LCD Дісплей;
2. Клока тесту;
3. Мундштук;
4. Лейба;
5. Кришка відсіку батарей;
6. Права кнопка;
7. Низький заряд батарей;
8. Одиниця виміру;
9. Індикатор з'єднання;
10. Індикація заряду батарей;
11. Використання зовнішнього джерела;
12. Ліва кнопка

Проведення тесту.

- Приєднайте мундштук до вхідного отвору в верхній частині приладу



УВАГА! Не використовуйте розчинники та спиртовмісні речовини для обробки мундштуків.

- Натисніть та утримуйте «Тест» до включення приладу. Пролунає звуковий сигнал, на дисплеї протягом 1 сек. висвітлиться показник кількості дів до наступного калібрування та кількість тестів з моменту проведення останнього технічного обслуговування.

0000



- Дочекайтесь відліку від 06 до 01.

06 > 04 > 01

- Після зворотного відліку, екран відобразить напис «С-».



C-

- Екран відобразить напис «- - -», Дочекайтеся результату.
- Результат вашого тесту буде відображатися на екрані протягом 20-ти секунд.

0.175

- В разі некоректного видоуху (слабого, недостатньо тривалого, або приривчастого) екран відобразить помилку: Eг-b.

Eг-b

УВАГА! Прилад автоматично вимкнеться, якщо намагатися провести вимір до того як прилад вийде в режим готовності.


Режим очікування

- Після проведення тесту АлкоФор 505 переходить у режим очікування. На дисплеї відображається "0000".

0000

- В режимі очікування прилад перебуває на протязі 5 хвилин.

- Для проведення нового тесту в режимі очікування, натисніть кнопку тест на протязі 1 сек.
- Для того щоб повністю вимкнути прилад в режимі очікування натисніть ліву кнопку на протязі 1 сек.
- Для того щоб подивитись останній тест, або роздрукувати ще один чек (якщо принтер підключено) натисніть праву кнопку.

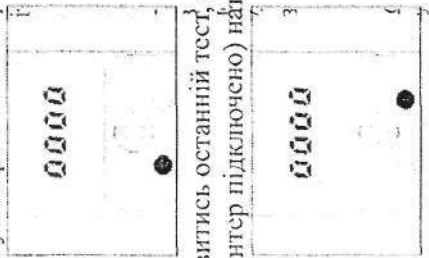

Підключення до мобільного принтеру

- Цей пристрій може використовувати кабель для роздруківки результату тесту. Скористайтесь кабелем для підключення АлкоФор 505 до принтера.

УВАГА!!! Мобільний принтер, обов'язково повинен бути ввімкнений та підключений до Алкотестера до моменту проведення тесту.

- Кожне вимірювання проведене при підключеному принтеру до прилада буде роздруковано.
- Якщо Вам необхідно роздрукувати додатковий чек необхідно в режимі очікування "0000" натиснути праву кнопку АлкоФор 505 і останнє вимірювання буде автоматично роздруковано.
- **Порада:** При виявленні алкогольного сп'яніння радимо одразу роздрукувати 2-3 чека.
- Для того щоб вимкнути принтер натисніть та утримуйте кнопку "Power".

Режим пасивного тесту:

Пасивний режим тестування використовується без мундштука, та призначений для перевірки наколишнього повітря або видихасмого повітря пацієнта який не реагує на звернення.

Проведення тесту:


Вхідний отвір (без мундштука!) ввімкненого приладу в режимі С-С- утримуйте на протязі, приблизно 5-10 сек в безпосередній близькості, наприклад перед ротовою порожниною або носом піддослідного. Після натисніть праву кнопку приладу. Прилад видасть результат на дисплеї. Будь-який показник відмінний від 0,00 — є признаком алкоголю в навколишньому повітрі.

Результати вимірювання отримані в пасивному режимі не відповідають концентрації алкоголю з глибини легень. За результатами даного тесту не можна робити висновки о стані алкогольного сп'яніння. Точну концентрацію алкогольного сп'яніння можливо отримати виключно при проведенні тесту в активному режимі.

Комплект постачання:

- АлкоФор 505 — 1 шт.
- Мундштуки — 5 шт.
- Інструкція з експлуатації
- Транспортувальний кейс
- Акумуляторна батарея
- Кабель для підключення до ПК

Налаштування приладу

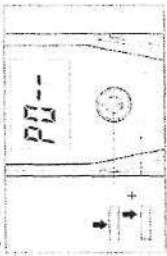- Натисніть та утримуйте ліву кнопку приладу і натисніть та утримуйте кнопку тесту доки на дисплеї не з'явиться напис
- 
- Введіть код налаштування приладу: P003. Зміна здійснюється правою кнопкою на приладі, перехід на наступний символ здійснюється автоматично (3 сек. бездіяльності).
 - Введіть налаштування:
 - дати (рік, місяць, дата)
 - часу (год:хв)
 - Addr — сервісне налаштування
 - rSet — пароль сервісного центру

Завантаження інформації

АлкоФор 505 має можливість підключення до ПК та передачі інформації з наступними даними:

- номер запису з пам'яті приладу
- дата (рік, місяць, число)
- час (год:хв)
- режим тесту:
 - Active - активний тест з мундштуком
 - Passive - пасивний тест
- результат вимірювання (Одиниця вимірювання — промілле)
- Температура. В цelsiusях.

Підключення здійснюється за допомогою USB кабелю (входить в комплект постачання).

УВАГА! Програмне забезпечення та повна інформація щодо підключення приладу до ПК є на сайті: **alkofor.ua**. Сторінка опису приладу АлкоФор 505.

Технічні характеристики

- Електрохімічний сенсор
- Час прогріву: 6 сек.
- Час продування: 5 секунд
- Час тестування: Не більше 10 секунд
- Поток видоху: 10 літрів/хв
- Захист від некоректного видоху
- Лічильник тестів
- 4-символьний дисплей з підсвіткою
- Діапазон вимірювання: 0,000 — 4,000‰
- Нижній поріг відображення результатів: 0,06‰
- Напис «НІ» у випадку, коли результат вимірювань перевищує діапазон відображення результатів
- Границі допустимої похибки, мг/дм: Від 0 до 0,25 - +/- 0,025
Понад 0,25 - +/- 10%.
- Повторення тесту: не менше ніж через 60 сек.
- Пам'ять на 4000 попередніх тестів
- Завантаження результатів вимірювання по USB
- Гранична норма 0,20‰. При перевищенні дисплей загоряється червоним кольором та подається додатковий звуковий сигнал.
- Живлення: акумуляторна батарея, Li-Ion, 3,7V, тип: BL-5C.
- Індикатор низького заряду батареї та автоматичне вимкнення
- Підключення до мобільного принтеру АлкоФор по кабелю
- Розмір 140x55x35 мм
- Маса 130 г.

Умови експлуатації:

- Температура довкілля, °C - Від -5 до +45
- Відносна вологість довкілля, % - Від 20 до 80
- Атмосферний тиск, кПа (мм.рт.ст) — Від 97,5 до 105

Прилад АлкоФор 505 відповідає наступним класам умов довкілля:

- Механічний клас — M2
- Електромагнітний клас - E2

Температура зберігання, °C: від -10 до 50

Попередження та повідомлення про помилки

Проблема або помилка	Опис
Немає індикації на РК-дисплеї	• Натисніть та утримуйте кнопку Тесту до включення приладу. • Зарядіть акумуляторну батарею • Зарядіть акумуляторну батарею • Закінчився час в режимі очікування • Проведення виміру до моменту виходу приладу в режим готовності
Ег-b	Слабкий видох, недостатньо тривалий або приривчастий.
Ег-0	Прилад знаходиться поза межами температурного режиму. Використовуйте прилад лише при температурі навколишнього середовища від -5°C до +45°C
НІ	Концентрація алкоголю перевищує 4,00 ‰.
	• Низький заряд батареї • Зарядіть акумуляторну батарею
Звукова сигналізація	• Приладу потрібне технічне обслуговування • Зверніться до сервісного центру