

АЛГОРИТМ ОБСТЕЖЕННЯ ВАГІТНИХ НА ВІЛ ТА СИФІЛІС ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ШТ, ЗАКУПЛЕНИХ ЗА КОШТИ ГФ

1. Тестування на ВІЛ проводиться всім вагітним жінкам відповідно до порядку та кратності обстежень, визначених чинними нормативно-правовими актами України.

2. У якості скринінгового тесту для діагностики ВІЛ-інфекції під час першого звернення вагітної до ЗОЗ у зв'язку із вагітністю слід застосовувати швидкі тести **SD Bioline HIV/Syphilis Duo**, призначені для одночасного виявлення серологічних маркерів ВІЛ та сифілісу.

У разі виявлення серологічних маркерів ВІЛ та/або сифілісу при застосуванні ШТ **SD Bioline HIV/Syphilis Duo**, подальше обстеження призначається у відповідності до вимог чинних нормативно-правових актів України.

Якщо ВІЛ-статус на момент першого звернення вагітної відомий як ВІЛ-позитивний, тестування не призначається. Якщо в анамнезі вагітної є інформація про лікований сифіліс, тестування на сифіліс із застосуванням цих тестів не призначається.

3. У разі отримання негативного результату тестування на ВІЛ при першому обстеженні вагітної, друге та, за потреби, третє обстеження проводять при наступних візитах.

У цих випадках для тестування вагітних у якості першого тесту для скринінгу використовують швидкі тести **Determine HIV Early Detect SET**, призначені для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ 1 та 2 типів, а також антигену р24 ВІЛ-1.

4. Алгоритм дій при визначенні ВІЛ-статусу

Під час використання ШТ можуть бути отримані негативні, позитивні або недійсні результати. Якщо отримані **недійсні** результати, дослідження повторюють з використанням ШТ того самого найменування.

Якщо на скринінговому та верифікаційному етапах були отримані **дискордантні результати досліджень** (скринінговий ШТ - «позитивний», підтверджувальний ШТ - «негативний»), проводять повторне обстеження особи з використанням тих найменувань ШТ, що використовувались для скринінгу (перший тест). При повторному отриманні дискордантних результатів (1-й тест позитивний, другий – негативний) особі рекомендують пройти повторне обстеження через 14 днів; результат досліджень вважають **невизначеним**.

Якщо при повторному дослідженні із застосуванням ШТ першої лінії (скринінговий тест) отримано негативний результат, остаточний результат тестування визначається як **негативний**. У цьому випадку подальших досліджень проводити не потрібно.

На **ідентифікаційному етапі** дозволяється використання тих самих найменувань ШТ, що застосовувались на скринінговому та верифікаційному етапах.

Оцінку результатів здійснюють два медичних працівники, незалежно один від одного. Якщо результат дослідження ШТ двома працівниками оцінюється по-різному, результат має оцінити третя особа. За остаточний варіант результату беруть такий, що був однаково оцінений двома

з трьох фахівців. Цей результат обліковують у формі Журналу реєстрації взяття крові та результатів досліджень з виявлення серологічних маркерів ВІЛ з використанням швидких тестів (форма № 498-5/о).

У разі наявності в ЗОЗ лише одного медичного працівника, результат, в порядку виключення, може оцінюватись одним медичним працівником, який пройшов відповідну підготовку з тестування на ВІЛ швидкими тестами

Проводять дослідження з встановлення ВІЛ-позитивного статусу у вагітних з використанням ШТ у відповідності до інструкції з використання конкретного тесту та алгоритмів, наведених у Додатках 1 та 2.

5. Алгоритм тестування вагітної жінки на ВІЛ-інфекцію та сифіліс за допомогою ШТ, закуплених за кошти Глобального Фонду, здійснюють шляхом послідовного використання комбінації трьох імунохроматографічних тестів:

1. Алгоритм обстеження при першому зверненні (Додаток 1)

Для забезпечення виконання цього алгоритму ЗОЗ повинен мати в наявності додатковий швидкий тест для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2, що відповідає вимогам щодо його специфічності (не нижче 99%).

тест-першої лінії – **SD Bioline HIV/Syphilis Duo**; тест другої лінії - **First Response® HIV 1-2-0 Card Test** (або, наприклад, **HIV 1+2 - Colloidal Gold**, або аналог); тест третьої лінії - **HIV 1+2 - Colloidal Gold** (за наявності, або інший з відповідними характеристиками щодо його специфічності, або **First Response® HIV 1-2-0 Card Test**).

Важливо: У даному алгоритмі тест **SD BioLine HIV¹/₂ 3.0** не може бути використаний для верифікації ВІЛ-позитивного статусу ані у якості тесту другої, ані третьої лінії, оскільки два тести одного виробника не можуть бути поєднані під час тестування! Тому заклад потребуватиме додаткового тесту (наприклад, **HIV 1+2 - Colloidal Gold**, або аналог)!

Відповідно до даного алгоритму, при отриманні **негативного результату** тесту першої лінії **SD Bioline HIV/Syphilis Duo (HIV-, TP-)** результат розцінюють як негативний. Особа не потребує подальшого обстеження.

Важливо: Отриманий **позитивний результат при тестуванні на сифіліс** із застосуванням тесту першої лінії **SD Bioline HIV/Syphilis Duo (HIV-, TP+)** може вказувати на поточну або минулу/виліковану інфекцію.

При отриманні **позитивного результату обстеження з використанням усіх трьох тестів** відповідно до алгоритму (позитивний результат тесту **SD Bioline HIV/Syphilis Duo** (у будь-якій комбінації: **HIV+, TP-; HIV+, TP+**) + позитивний результат тесту **First Response® HIV 1-2-0 Card Test** (або, наприклад, **HIV 1+2 - Colloidal Gold**, за наявності) + позитивний результат тесту **HIV 1+2 - Colloidal Gold** (за наявності, або **First Response® HIV 1-2-0 Card Test**) результат тестування розцінюється як такий, що серологічні маркери ВІЛ виявлені. Вагітну направити до відповідного закладу охорони здоров'я для взяття під медичний нагляд у зв'язку з ВІЛ.

При отриманні **невизначеного результату обстеження** відповідно до алгоритму (Додаток 1) (позитивний результат тесту **SD Bioline HIV/Syphilis Duo** (у будь-якій комбінації: **HIV+, TP- ;**

HIV+, TP+) + негативний результат тесту **First Response® HIV 1-2-0 Card Test** (або **HIV 1+2 - Colloidal Gold**) або позитивний результат тесту **SD Bioline HIV/Syphilis Duo** (у будь-якій комбінації: **HIV+, TP-; HIV+, TP+**) + позитивний результат тесту **First Response® HIV 1-2-0 Card Test** (або **HIV 1+2 - Colloidal Gold**) + негативний результат тесту **HIV 1+2 - Colloidal Gold** (або **First Response® HIV 1-2-0 Card Test**) результат тестування розцінюють як невизначений. Особі рекомендовано пройти повторне обстеження через 14 днів.

2. Алгоритм обстеження при повторному (другий або третій візити) зверненні (Додаток 2)

тест-першої лінії – **Determine HIV Early Detect**; тест другої лінії - **SD BioLine HIV½ 3.0**; тест третьої лінії - **First Response® HIV 1-2-0 Card Test** (або, наприклад, **HIV 1+2 - Colloidal Gold**, за наявності).

Відповідно до цього алгоритму (Додаток 2), при отриманні **негативного результату** тесту першої лінії **Determine HIV Early Detect (Ag-Ab-)** результат дослідження вважається негативним. Особа не потребує подальшого обстеження.

У разі отримання позитивного результату тесту **Determine HIV Early Detect** (у будь-якій комбінації: **Ag+Ab-; Ag+Ab+; Ag-Ab+**) дослідження повторюють для виключення можливих помилок. При повторному отриманні попередніх результатів переходять до верифікаційного етапу дослідження для підтвердження наявності серологічних маркерів ВІЛ з використанням тестів другої та третьої ліній - **SD BioLine HIV½ 3.0** (або, наприклад, **HIV 1+2 - Colloidal Gold**, за наявності) та **First Response® HIV 1-2-0 Card Test**.


При отриманні **позитивного результату обстеження з використанням усіх трьох тестів** відповідно до алгоритму (позитивний результат тесту **Determine HIV Early Detect** (у будь-якій комбінації: **Ag+Ab-; Ag+Ab+; Ag-Ab+**) + позитивний результат тесту **SD BioLine HIV½ 3.0** + позитивний результат тесту **First Response® HIV 1-2-0 Card Test** результат тестування вважається позитивним. Вагітну направити до відповідного закладу охорони здоров'я для взяття під медичний нагляд у зв'язку з ВІЛ.

При отриманні **невизначеного результату обстеження** відповідно до алгоритму (Додаток 2) (позитивний результат тесту **Determine HIV Early Detect** (у будь-якій комбінації: **Ag+Ab-; Ag+Ab+; Ag-Ab+**) + негативний результат тесту **SD BioLine HIV½ 3.0** або позитивний результат тесту **Determine HIV Early Detect** (у будь-якій комбінації: **Ag+Ab-; Ag+Ab+; Ag-Ab+**) + позитивний результат тесту **SD BioLine HIV½ 3.0** + негативний результат тесту **First Response® HIV 1-2-0 Card Test**) результат тестування вважається невизначеним. Особі рекомендовано пройти повторне обстеження через 14 днів.


Додатки: 1. Алгоритм застосування ШТ при встановленні ВІЛ-статусу (перший візит);

2. Алгоритм застосування ШТ при встановленні ВІЛ-статусу (другий або третій візит)

Алгоритм застосування ШТ при встановленні ВІЛ-статусу (перший візит)

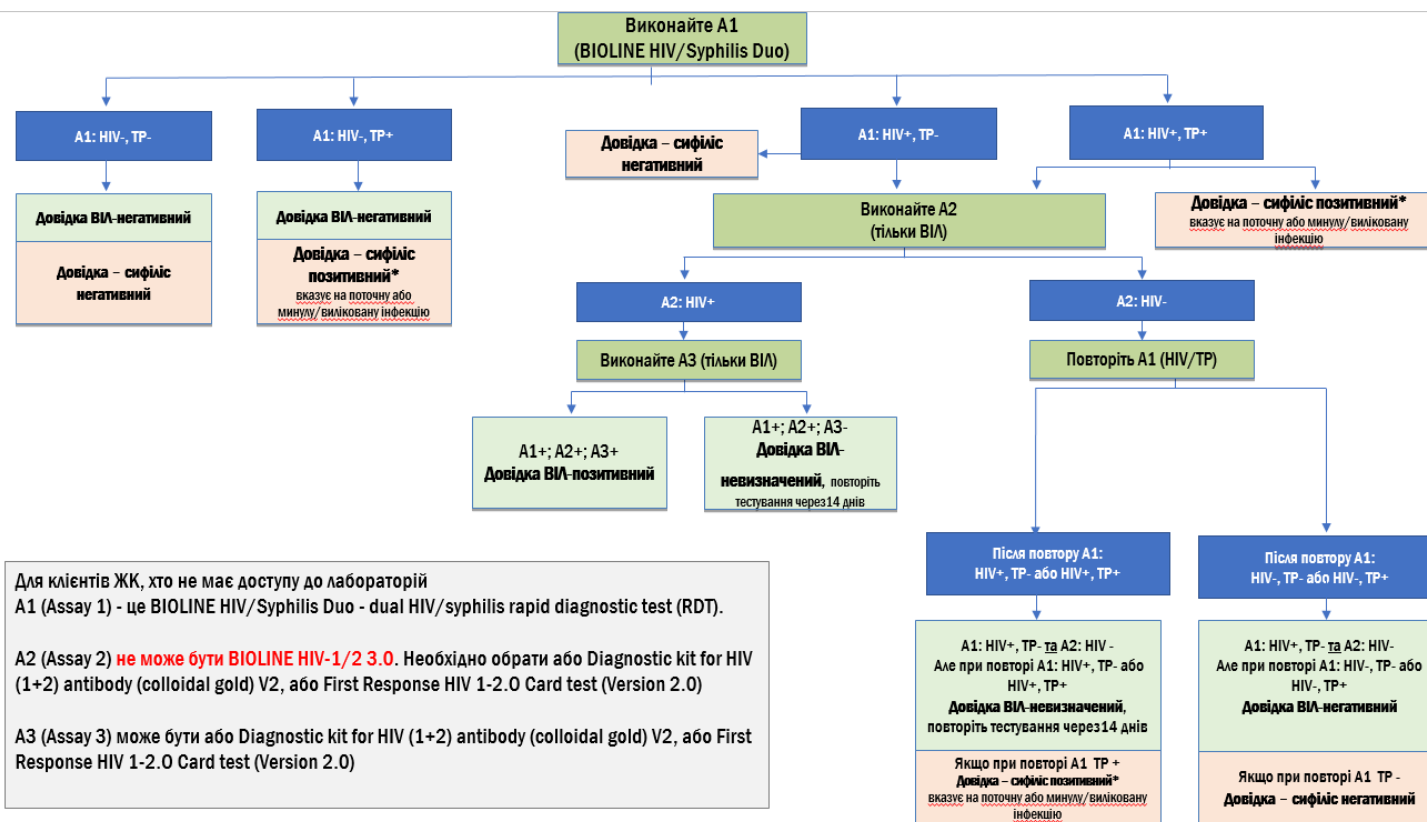

Алгоритм застосування ШТ при встановленні ВІЛ-статусу (другий або третій візит)

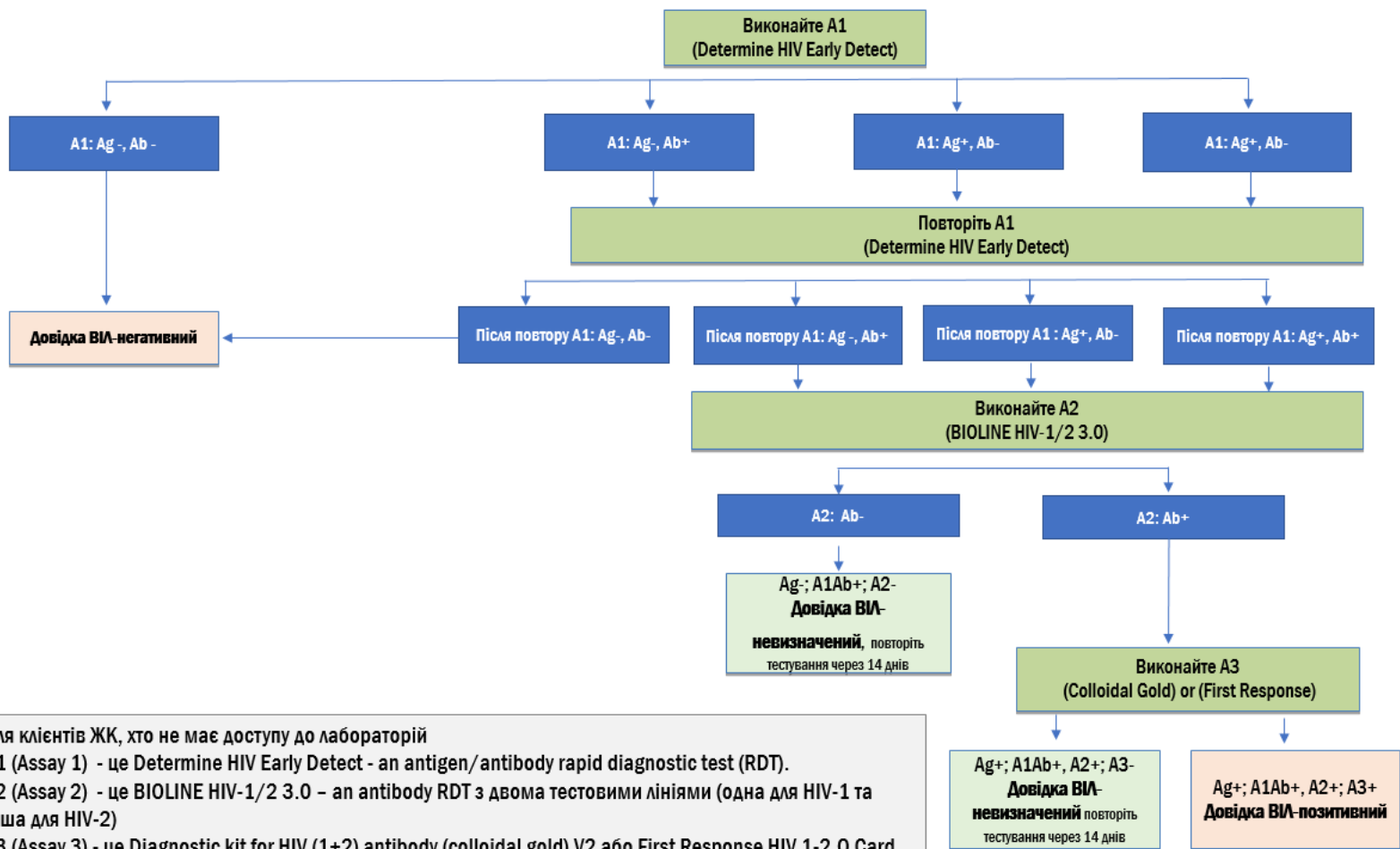

Для клієнтів ЖК, хто не має доступу до лабораторій
 A1 (Assay 1) - це Determine HIV Early Detect - an antigen/antibody rapid diagnostic test (RDT).
 A2 (Assay 2) - це BIOLINE HIV-1/2 3.0 - an antibody RDT з двома тестовими лініями (одна для HIV-1 та інша для HIV-2)
 A3 (Assay 3) - це Diagnostic kit for HIV (1+2) antibody (colloidal gold) V2 або First Response HIV 1-2.0 Card test (Version 2.0) - обидва для виявлення antibody RDTs