



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я

ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»

МЕТОДИКА

проведення навчання та підготовки за темою:

Використання засобів індивідуального захисту

Зміст:

I. Методичні рекомендації.

II. СОП

1. Одягання та знімання ЗІЗ
2. Надягання та знімання медичних рукавичок

I. Методичні рекомендації

Засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ) - означає всі засоби, які призначені для носіння і використання працівником з метою індивідуального захисту від одного або більше ризиків, які могли б становити загрозу безпеці та здоров'ю на роботі, а також будь-які пристосування, аксесуари чи змінні компоненти, призначені для цієї мети.

Термін ЗІЗ не застосовується до спеціального робочого одягу та уніформи, які не призначені для забезпечення безпеки і захисту здоров'я працівника.

Всі ЗІЗ мають відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту щодо безпеки та Державним стандартам України щодо їхнього виготовлення та випробування, якщо це зазначено в нормативно-правових актах.

Вибір ЗІЗ має ґрунтуватися на характері взаємодії з пацієнтом та/або вірогідному шляху інфікування:

- відповідати ступеню існуючих ризиків для життя та здоров'я працівників та не призводити до будь-якого збільшення рівня цього ризику;
- відповідати існуючим на робочому місці умовам;
- підходити користувачеві після необхідного регулювання.

ЗІЗ при проведенні догляду за пацієнтами можуть виконувати бар'єрну і фільтрувальну функції, використовуватися окремо або в комбінації для захисту слизових оболонок, дихальних шляхів, шкіри і одягу від контакту з інфекційними агентами.

ЗІЗ, які можуть використовуватися в рамках стандартних заходів захисту.

Медична (хірургічна) маска (далі – маска) — це медичний виріб, що прикриває ніс, рот та підборіддя, утворюючи бар'єр для прямого передавання інфекцій між персоналом і пацієнтами. Якщо її носити належним чином, медична маска допомагає блокувати великі краплі або бризки, що можуть містити мікроби (віруси та бактерії), не дає їм потрапити на слизові оболонки рота та носа.

Маску потрібно надягати:

- пацієнтам з кашлем з метою обмежити потенційне розповсюдження респіраторних виділень, що можуть містити інфекційні агенти;
- працівникам з метою їх захисту під час контакту з пацієнтами та/або біологічними виділеннями від них;
- медичним працівниками при виконанні процедур і маніпуляцій, що вимагають стерильності, з метою захисту пацієнтів від можливого впливу інфекційних агентів, які можуть переноситися в носі та/або роті.

Маски мають відповідати Державним стандартам України (ДСТУ EN 14683:2014 Маски хірургічні. Вимоги та методи випробовування)

- виготовлені з гіпоалергенного матеріалу;
- спосіб кріплення: гумові петлі або зав'язки;
- наявний носовий зажим (фіксатор).

1. Перед надяганням маски потрібно обов'язково провести гігієну рук.
2. Маску потрібно надягати закинувши гумові петлі або зав'язки за вуха, розправити маску та притиснути носовий зажим до спинки носа. Замінюють маски кожні 2-4 години роботи або одразу після того, як вона стала вологою, брудною або пошкодженою.
3. Знімати маску потрібно за резинові петлі або зав'язки не торкаючись до її зовнішньої поверхні та помістити у відповідний контейнер для медичних відходів (медична маска – це засіб індивідуального захисту одноразового використання, який не підлягає обробленню з метою повторного використання).
4. Після зняття маски потрібно обов'язково провести гігієну рук або кожного разу, коли відбулося торкання до її зовнішньої (потенційно забрудненої) поверхні.

Респіратор – це засіб індивідуального захисту, призначений для захисту дихальних шляхів користувача від вдихання повітря, яке може спричинити шкідливий вплив на здоров'я.

Медичні працівники використовують респіратори, що відповідають Державним стандартам України, які затверджуються відповідним органом центральної виконавчої влади з питань технічного регулювання.

Респіратори використовують медичні працівники під час:

- проведення догляду за пацієнтами, які мають інфекційні хвороби, що передаються повітряним шляхом (наприклад, туберкульоз, кір, вітряна віспа);
- проведення догляду за пацієнтами, які мають інфекційні хвороби з невідомим шляхом передавання (наприклад, під час роботи у ППАІ);
- під час проведення аерозольгенеруючих процедур.

Респіратор захищає користувача від вдихання інфекційного аерозолі за рахунок своєї будови.

Інфекційний аерозоль - повітряно-крапельна суміш у вигляді дрібнодисперсного аерозолі (0,5-5 мкм), що містить інфекційний агент, яка вивільняється з органів дихання у навколишнє середовище під час респіраторних актів (розмови, кашлю, чхання, форсованого дихання) хворої на туберкульоз легень людини, під час проведення аерозольгенеруючих процедур (бронхоскопія, інтубація трахеї, аутопсія тощо) або штучно утворений аерозоль (при роботі із зараженим біоматеріалом, під час аварійної ситуації).

Класи захисту респіраторів та в чому різниця між респіраторами N95 та FFP2:

Респіратор N95 забезпечує фільтрацію інфекційних часточок розміром 0,3 мкм на 95% (схвалений Національним інститутом безпеки та гігієни праці (NIOSH) Центрів контролю та профілактики хвороб США);

Респіратор FFP2 забезпечує фільтрацію інфекційних часточок розміром 0,4 мкм на 94% (відповідає основним вимогам щодо здоров'я та безпеки, викладеним у європейських директивах «Conformité Européene»);

Респіратор FFP3 забезпечує фільтрацію інфекційних часточок розміром 0,4 мкм на 99% (відповідає основним вимогам щодо здоров'я та безпеки, викладеним у європейських директивах «Conformité Européene»);

Респіратор повинний мати клас захисту **не менш, ніж FFP2 або N95** відповідно.

Щоб використовувати респіратор, медичні працівники повинні обов'язково проходити фіт-тест не рідше 1 разу на рік або частіше за наявності відповідних показань, до прикладу, при зміні моделі респіратора або значних змінах форми обличчя (в результаті пластичних операцій, травм та ін.).

Підтвердженням проходження фіт-тесту є заповнений протокол дослідження, який має зберігатися до проходження наступного фіт-тесту або протягом року, в залежності, що настане швидше.

Методика проведення фіт-тесту див. СОП «Проведення якісного фіт-тесту».

Правила використання респіратора (для правшів):

1. Переконайтеся в наявності необхідної саме вам моделі респіратора (за результатами персонального фіт-тесту);
2. Обов'язково проведіть гігієну рук;
3. Завести руками резинки/петлі на зовнішню поверхню респіратора та просунути долоню правої руки під ними;

4. Прикласти чашу респіратора до обличчя, лівою рукою верхню резинку перекинути на потилицю, нижню — за вуха (на шию);
5. Розправити респіратор на обличчі, притиснути носовий фіксатор до спинки носа пальцями обох рук;
6. Перевірити, щоб резинки/петлі респіратора не перехрещувалися — для цього достатньо подивитися на себе в дзеркало або попросити перевірити це колегу, якщо дзеркало недоступне;
7. Провести тест долоні. Тримайте руки перед респіратором і зробіть різкий вдих (якщо респіратор з клапаном) або видих (якщо респіратор без клапана). Якщо відчувається, що повітря проходить між респіратором та обличчям, треба поправити респіратор на обличчі та повторити тест долоні;
8. Знімати респіратор потрібно за резинки/петлі не торкаючись при цьому його зовнішньої поверхні та помістити у контейнер для медичних відходів;
9. Провести гігієну рук після зняття респіатора та кожного разу, коли доторкнулися до його зовнішньої (потенційно забрудненої) поверхні.

Захисні окуляри/щиток для обличчя

Захисні окуляри та щитки, які використовують медичні працівники повинні відповідати Державним стандартам України, які затверджуються відповідним органом центральної виконавчої влади з питань технічного регулювання.

Захисні окуляри та щитки використовуються для захисту слизових оболонок очей та шкіри обличчя, повинні забезпечувати хорошу видимість та зберігати достатній периферичний огляд, мати захист від запотівання, регулюватися для зручної посадки, бути зручними та не зміщуватися під час виконання клінічної діяльності. Вони можуть бути одноразовими та багаторазовими (обмеженого використання) про що має бути вказано в інструкції виробника (паспорті виробу) з зазначенням методу оброблення виробу з метою повторного використання (у випадку виробу багаторазового використання).

Персональні окуляри чи контактні лінзи не є засобами індивідуального захисту для слизових оболонок очей.

Зазвичай захисні окуляри/щитки використовуються в комплексі з іншими ЗІЗ.

Захисні окуляри/щитки потрібно знімати захопивши руками за ремінь кріплення або резинки не торкаючись зовнішньої (потенційно забрудненої) поверхні. У випадку доторкання руками до зовнішньої поверхні окулярів/щитка – потрібно провести гігієну рук.

Халат захисний від інфекційних агентів (далі – ХЗІА)

ХЗІА - це засіб індивідуального захисту для забезпечення широкого бар'єрного захисту відкритих ділянок тіла і одягу працівника від забруднення кров'ю, іншими біологічними рідинами та потенційно інфікованими матеріалами. ХЗІА завжди носять в поєднанні з іншими ЗІЗ

Куртки, клінічні і лабораторні халати, які надягаються поверх особистого одягу для зручності та/або цілей ідентифікації, не можуть вважатися ЗІЗ.

1. Розгорніть ХЗІА та одягніть його таким чином, щоб він покривав руки, тулуб та ноги до середини гомілок. На рукавах повинні бути манжети для щільного прилягання до шкіри. Зав'яжіть зав'язки на поясі та шиї (за наявності).

2. ХЗІА слід знімати таким чином, аби запобігти забрудненню одягу та шкіри. Зовнішня (потенційно забруднена) сторона ХЗІА завертається в середину, згортається в жмуток. В подальшому ХЗІА поміщається в контейнер для медичних відходів.

3. Провести гігієну рук після зняття ХЗІА або кожного разу, коли доторкуєтесь до його зовнішньої сторони.

Медичні рукавички

Медичні рукавички (далі - рукавички) — це засіб індивідуального захисту одноразового використання, їх заборонено мити або оброблювати дезінфікуючими засобами з метою повторного використання, оскільки такі дії можуть пошкодити цілісність матеріалу та поставити під сумнів захисну функцію рукавичок.

Рукавички використовують:

1. Щоб зменшити ризик забруднення рук медичних працівників кров'ю та іншими рідинами організму.
2. Щоб зменшити ризик поширення мікроорганізмів у навколишньому середовищі та передачі від медичного працівника до пацієнта і навпаки, а також від одного пацієнта до іншого.

Медичні працівники надягають рукавички у випадках:

1. передбачуваного прямого контакту з кров'ю або іншими біологічними рідинами, слизовими оболонками та потенційно інфікованими матеріалами;
2. прямого контакту з пацієнтами, які колонізовані або інфіковані патогенами, які передаються контактним шляхом;
3. роботи з видимо або потенційно забрудненим обладнанням, що використовується при догляді за пацієнтами та поверхнями.

У медичній практиці використовуються три типи рукавичок:

1. **стерильні:** використовуються при проведенні інвазивних втручань, що вимагають підтримки асептичних умов;
2. **нестерильні/оглядові:** забезпечують захист працівників при виконанні багатьох медичних маніпуляцій;
3. **рукавички для проведення хіміотерапії.**

Вони можуть бути виготовлені з латексу, вінілу або нітрилу. Використовувати покриті тальком (тальковані) рукавички в ЗОЗ ЗАБОРОНЕНО.


Рукавички необхідно замінювати між проведенням догляду за різними пацієнтами та під час догляду за одним пацієнтом, коли ви переміщуєтесь з будь-якої ділянки тіла на іншу, наприклад, пошкоджену шкіру, слизову оболонку або інвазивний медичний пристрій у того самого пацієнта.

Використання рукавичок жодним чином не замінює гігієну рук. Рутинне використання рукавичок у випадках, коли це не показано призводить до:

- Марної витрати ресурсів;
- Потенційної втрати можливостей проведення гігієни рук;
- Використання забруднених рукавичок через неналежне зберігання, невідповідні моменти та методи надягання та зняття також може призвести до передачі мікробів.

Рукавички становлять ризик передачі патогенів та інфекцій, якщо їх використовувати неналежним чином!

Показання до використання різних типів рукавичок наведено нижче.

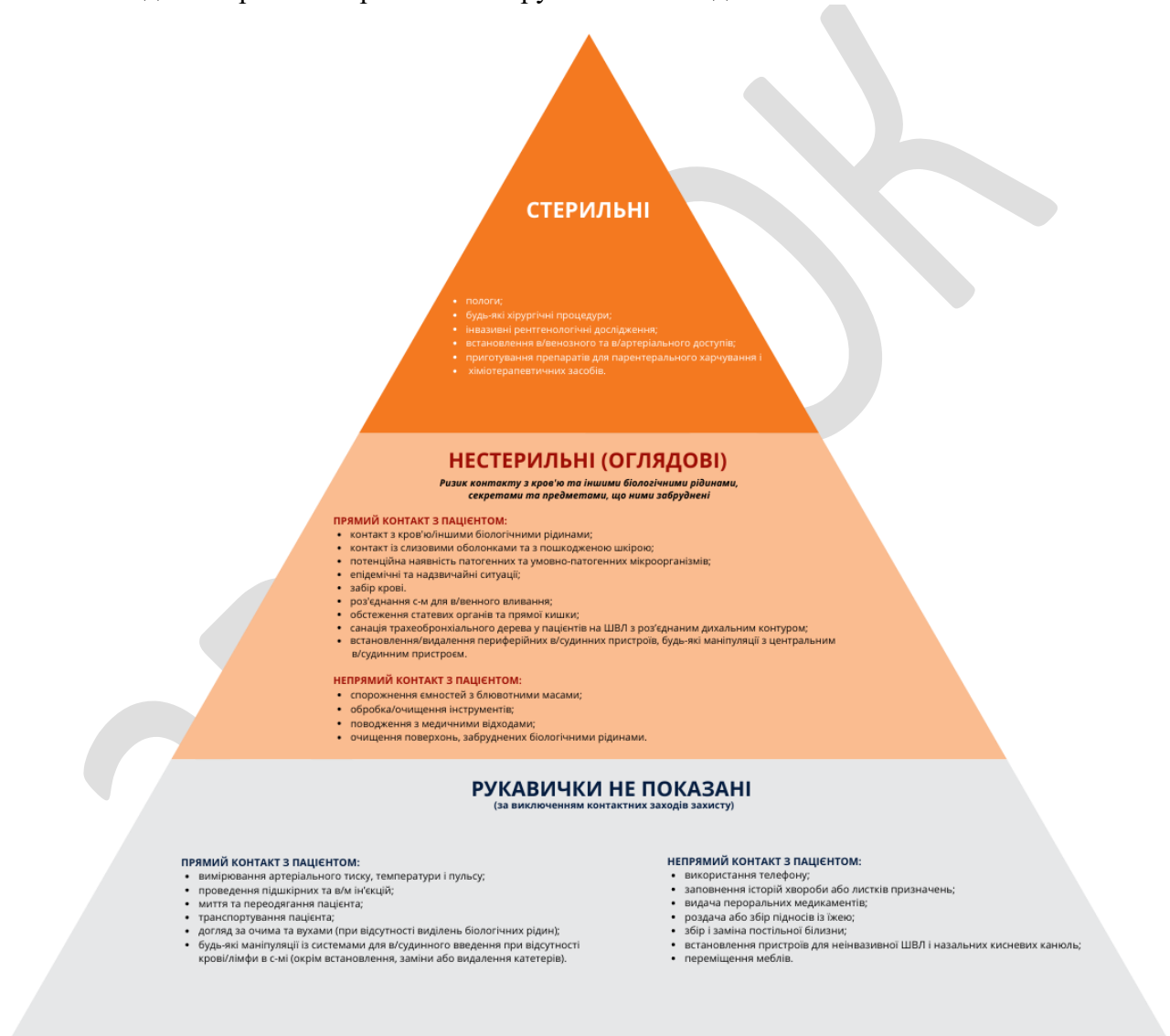

Адаптовано з рекомендацій BOO3

[https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-\(ihs\)/infection-prevention-and-control/hand-hygiene/tools/glove-use-information-leaflet.pdf?sfvrsn=13670aa_10](https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-(ihs)/infection-prevention-and-control/hand-hygiene/tools/glove-use-information-leaflet.pdf?sfvrsn=13670aa_10)

Корисні посилання:

1. Наказ МОЗ України № 1614 від 03.08.2021, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.10.2021р. № 1318/36940 «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та установах/ закладах надання соціальних послуг/ соціального захисту населення».

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1318-21#n12>



2. Наказ МОЗ України № 1777 від 03.08.2020р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України

10 листопада 2020 р. за № 1110/35393 «Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами»

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1110-20#Text>



Рекомендації ВООЗ:

[https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-\(ihs\)/infection-prevention-and-control/hand-hygiene/tools/glove-use-information-leaflet.pdf?sfvrsn=13670aa_10](https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-(ihs)/infection-prevention-and-control/hand-hygiene/tools/glove-use-information-leaflet.pdf?sfvrsn=13670aa_10)

[https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-\(ihs\)/ppe/ppe-en.pdf?sfvrsn=9937c9e7_4&download=true](https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-(ihs)/ppe/ppe-en.pdf?sfvrsn=9937c9e7_4&download=true)

Рекомендації CDC:

<https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/PPE-Sequence.pdf>

Рекомендації FDA:

<https://www.fda.gov/medical-devices/general-hospital-devices-and-supplies/personal-protective-equipment-infection-control>



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я

ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»

Сторінка

1 з 2

Дата
затвердження

Дата
перегляду

Версія

1

Стандартна операційна процедура:
**Послідовність одягання та зняття засобів
індивідуального захисту (ЗІЗ)**

Наказ МОЗ України № 1777 від 03.08.2021р. «Про затвердження
Заходів та Засобів щодо попередження інфікування при проведенні
догляду за пацієнтами».

<https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/PPE-Sequence.pdf>

Пов'язані документи

Для кого

Всіх медичних та за потреби визначених немедичних працівників закладу
охорони здоров'я

Послідовність одягання засобів індивідуального захисту

1

Зніміть всі особисті речі

(прикраси/каблучки, годинник, мобільний телефон тощо)



2

Виконайте гігієну рук


(миття рук водою з милом або обробку рук
спиртовмісним антисептиком)



3

**Халат захисний від інфекційних агентів
(ХЗІА):**

- розгорніть та одягніть (ХЗІА має повністю закривати тулуб, руки до зап'ястя, ноги до середини гомілок);
- зав'яжіть зав'язки на талії та шиї (за наявності)

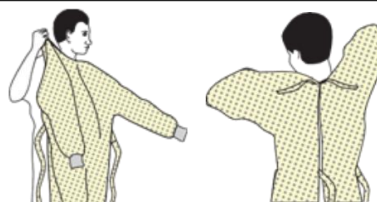


4

Медична (хірургічна) маска:

- руками закіньте гумові петлі за вуха або зафіксуйте зав'язки над та під вухами;
- розправте маску таким чином, щоб вона повністю прикривала ніс, рот та підборіддя;
- притисніть носовий зажим до спинки носа.

Респіратор:

- заведіть резинки на зовнішню поверхню респіратора та просуньте долоню під ними;
- прикладіть чашу респіратора до обличчя, верхню резинку перекиньте на потилицю, нижню — за вуха;
- розправте респіратор на обличчі, обтисніть носову пластину пальцями обох рук;
- проведіть тест долоні

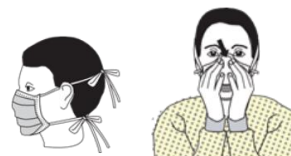

5

Захисні окуляари або щиток для обличчя:

- надягніть окуляри або щиток так, щоб прикрити очі та шкіру навколо обличчя;
- відрегулюйте кріплення по розміру.



6

Медичні рукавички:

надягніть рукавички поверх манжет ХЗІА






Послідовність зняття засобів індивідуального захисту

1

Медичні рукавички:

(зовнішня частина рукавичок забруднена)

- рукою в рукавичці візьміться за долоню іншої руки в рукавичці та зніміть першу рукавичку;
- тримайте зняту рукавичку рукою в рукавичці;
- просуньте пальці руки без рукавички під рукавичку іншої руки та зніміть другу рукавичку поверх першої;
- викиньте рукавички в контейнер для відходів;
- якщо ваші руки забруднилися під час зняття рукавичок - проведіть гігієну рук!

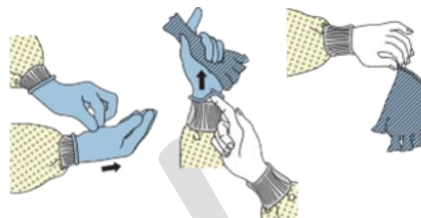

2

Захисні окуляри або щиток для обличчя:

(зовнішня поверхня забруднена)

- зніміть захисні окуляри або щиток для обличчя піднявши ремінець або навушники;
- якщо предмет багаторазового використання, помістіть його у призначену ємність для повторної обробки, в іншому випадку викиньте в контейнер для відходів;
- якщо ваші руки забруднилися під час зняття захисних окулярів/щитка - проведіть гігієну рук!



3

Халат захисний від інфекційних агентів:

(передня поверхня халата та рукави забруднені)

- Розв'яжіть зав'язки, щоб рукави не торкалися тіла;
- Спочатку відокремте ХЗІА від шиї та плечей, торкаючись лише внутрішньої сторони;
- Виверніть халат навиворіт;
- Складіть або згорніть у пучок і викиньте у контейнер для відходів;
- якщо ваші руки забруднилися під час зняття ХЗІА - проведіть гігієну рук!




4

Медична (хірургічна) маска/респіратор:

Передня частина маски/респіратора забруднена — НЕ ТОРКАЙТЕСЯ!

- Візьміться за нижні резинки або зав'язки маски/респіратора, потім за верхні та зніміть, не торкаючись передньої частини;
- Викиньте в контейнер для відходів.

Знімати ЗІЗ органів дихання на території брудної зони заборонено!



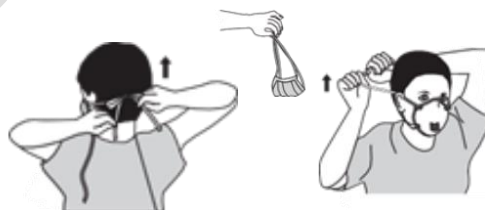


5

Виконайте гігієну рук

(миття рук водою з милом або обробку рук спиртовмісним антисептиком)

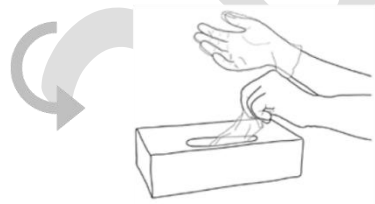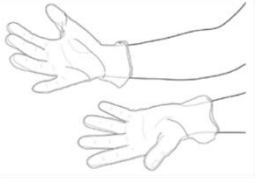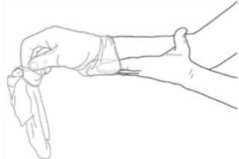

 ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»		Сторінка	1 з 1
		Дата затвердження	
Стандартна операційна процедура: Надягання та зняття медичних рукавичок		Дата перегляду	
		Версія	1
Наказ МОЗ України № 1777 від 03.08.2021р. «Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами».		Пов'язані документи	
https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/PPE-Sequence.pdf			
Для кого	Всіх медичних та за потреби визначених немедичних працівників закладу охорони здоров'я		
Умови, які мають бути дотримані	Наявні наступні матеріали та засоби: 1. медичні рукавички різних розмірів, в достатній кількості; 2. засоби для проведення гігієни рук (спиртовмісний антисептик або місце для миття рук: умивальник (вода), мило, паперові рушники); 3. ємність для медичних відходів. Проведено навчання працівників щодо використання медичних рукавичок, правил їхнього надягання та зняття.		
Алгоритм надягання та зняття медичних рукавичок			
 або  Проведіть гігієну рук  Дістаньте рукавичку з упаковки  Торкайтеся лише тієї частини рукавички, яка буде знаходитися на зап'ястті (верхній край манжети)  Надягніть першу рукавичку  Візьміть другу рукавичку рукою без рукавички, торкайтеся лише тієї частини, яка буде знаходитися на зап'ясті  Аби уникнути доторкування руки в рукавичці до шкіри передпліччя, захопіть другу рукавичку зігнутими пальцями за зовнішню поверхню під манжетою та надягніть  Після того як рукавички надягнуті заборонено торкатися до будь-яких об'єктів зовнішнього середовища, контакт з якими є показанням до заміни рукавичок  Захопіть одну рукавичку на рівні зап'ястя, не торкаючись шкіри передпліччя та знімайте її вивертаючи при цьому рукавичку назовні  Тримайте зняту рукавичку іншою рукою в рукавичці. Пальці руки без рукавички просуньте під рукавичку іншої руки та зніміть її  Помістіть використані рукавички в ємність для відходів  або  Проведіть гігієну рук			